


# Tomamuestra 725 microbiológico

## FUNCIONAMIENTO

Primero se debe sacar el Tapón Roscado, luego se desenrosca unas vueltas el volante para que la junta de cierre no quede tan comprimida (importante no desenroscarlo completo porque deja de sellar el elastómero comenzará a perder producto el tomamuestra).

Finalmete se clava la aguja de la jeringa en la goma y se extrae la muestra deseada.

Luego de la extracción se debe cerrar el volante y posteriormete volver a colocar el tapón roscado.

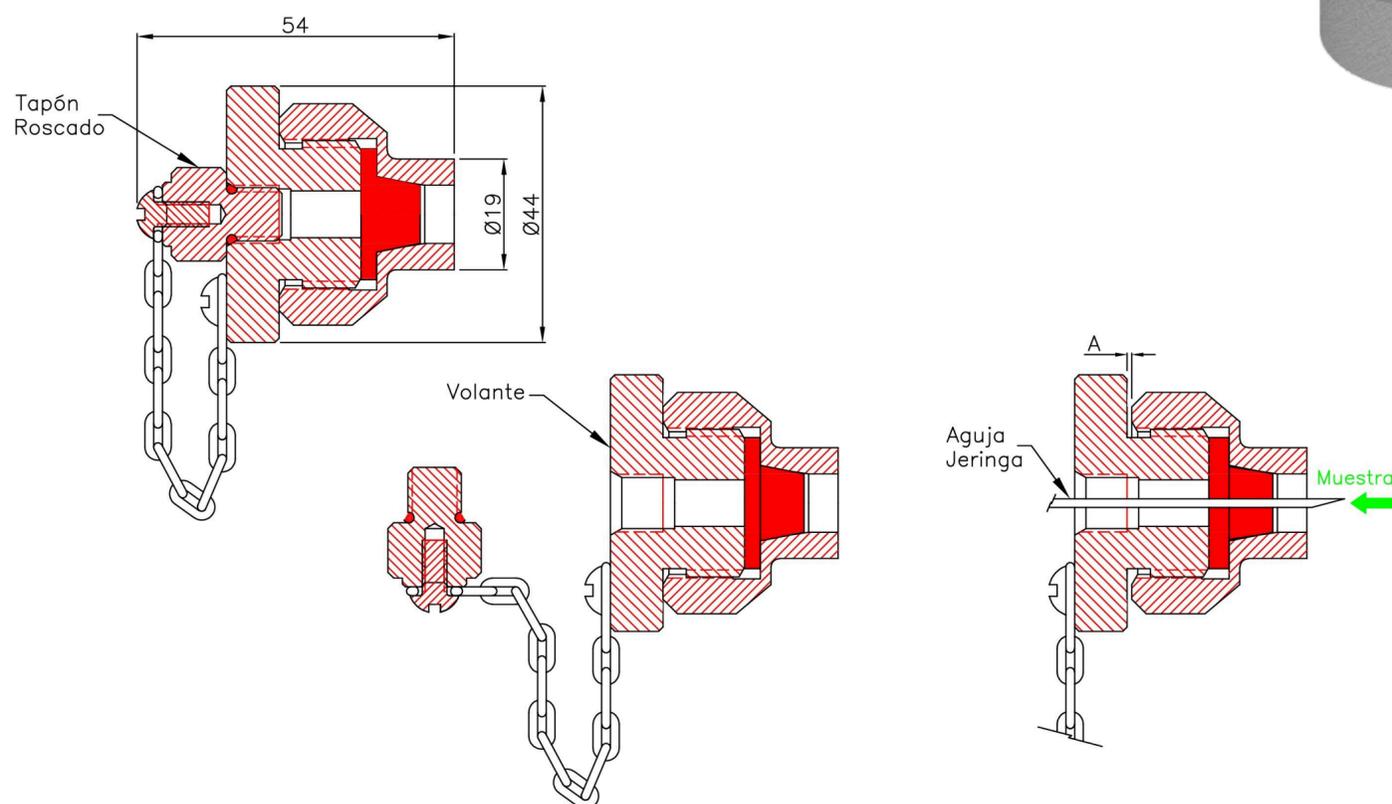

Las especificaciones de los productos representados en estas páginas, están sujetas a cambios sin previo aviso